



INSTRUCTIES VOOR STAALAFNAME - CYTOLOGIE

CERVIX/VAGINALE CYTOLOGIE

Uitvoerfrequentie

Iedere werkdag (maandag tem vrijdag, behalve op feestdagen).

Antwoordtijd

Binnen de 5 werkdagen na registratie op het labo anatomo-pathologie. Indien een bijkomende HPV-typering moet worden uitgevoerd : extra 2 - 3 weken.

Instructies voor staalafname

We raden aan een cervixcytologie of vaginakoepelcytologie af te nemen voor verwerking volgens de dunne laag techniek (monolayer).

In ons labo wordt verwerking volgens de dunne laag techniek van Thinprep (Hologic) uitgevoerd.

Gebruik hierbij steeds de speciale cervexbrush, die meegeleverd is met de potjes. Voor postmenopauzale patiënten, kan u, na voorafgaande bestelling op het labo anatomo-pathologie, een aangepaste combi-cervexbrush gebruiken. Deze maakt een afname dieper in het endocervicaal kanaal mogelijk (met meer kans op aanwezigheid van endocervicale cellen in het staal).


Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

instructies voor staalafname-cytologie-cervix, vaginale cytologie versie mei 2015

Volg minutieus de 'Thinprep aanwijzingen voor het maken van Pap test monsters', zoals hieronder beschreven (u kan deze aanwijzingen ook op papier verkrijgen in het labo anatomo-pathologie) :

- Zet alles klaar alvorens aan de procedure te beginnen.
- Controleer de uiterste gebruiksdatum op het potje.
- Controleer of de complete plastic verzegeling van het dekseltje van het potje verwijderd is en weggegooid.
- Vul de patiëntgegevens op zowel het aanvraagformulier als het potje volledig in.
- Verwijder voor het nemen van het monster het dekseltje van het potje.
- Gebruik geen glijmiddel (gel) omdat dit invloed kan hebben op het verwerkingsproces. Als alternatief kan het speculum zacht worden verwarmd met warm water.
- Indien teveel slijm op de baarmoederhals aanwezig is, moet dit voorzichtig weggehaald worden , voordat het monster wordt genomen.

NEEM ...

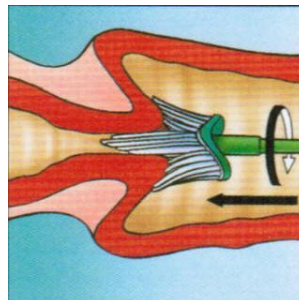


figuur 1

een toereikend monster van de baarmoederhals met de Cervex Brush (groen bezemachtig instrument) (figuur 1). Breng het middelste gedeelte van de borstel diep genoeg in het baarmoederhalskanaal zodat de kortere borstelhaartjes volledig in contact komen met de baarmoederhals. Duw voorzichtig en draai de borstel 5 keer met de klok mee.

Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

instructies voor staalafname-cytologie-cervix, vaginale cytologie versie mei 2015


SPOEL ...

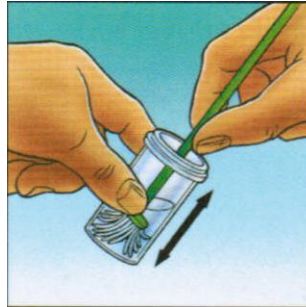

figuur 2

de Cervex Brush onmiddellijk uit in het Preservcyt potje door hem 10 keer krachtig tegen de bodem aan te drukken waardoor de borstelhaartjes uit elkaar gaan staan (figuur 2). Draai tenslotte de borstel enkele keren goed rond in het potje om de laatste restjes materiaal los te krijgen. Gooi de Cervex Brush volledig weg.

VASTDRAAIEN...

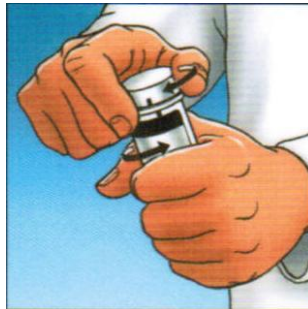

figuur 3

van het dekseltje zodat de zwarte markering op het dekseltje (figuur 3), op gelijke hoogte komt met de zwarte markering op het potje.

Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

instructies voor staalafname-cytologie-cervix, vaginale cytologie versie mei 2015

Aanvraagformulier

Gebruik het speciale aanvraagformulier 'Aanvraag cytologisch onderzoek baarmoederhals'.

Kruis de relevante klinische inlichtingen aan.

Kleef etiket volledige patiëntengegevens bovenaan, vermeld aanvrager (stempel), RIZIV-nr. en handtekening aanvrager.

Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

instructies voor staalafname-cytologie-cervix, vaginale cytologie versie mei 2015